

Sicherheits- und Anwendungshinweise für die Sofort Kalt Komresse

Die Hinweise gelten für alle Produktgrößen und Varianten


1. Aktivierung und Anwendung:

- Durch leichtes Drücken und Schütteln des Beutels wird eine chemische Reaktion aktiviert, die sofortige Kälte erzeugt.
- Der Kältebeutel ist ideal für akute Verletzungen wie Prellungen, Schwellungen oder Zerrungen und bietet schnelle Linderung.

2. Sicherheits- und Anwendungshinweise:

- Um Hautirritationen zu vermeiden, sollte das Pack **nicht direkt auf die Haut** gelegt werden; eine dünne Stoffschicht wird empfohlen.
- **Nur zur äußerlichen Anwendung und außerhalb der Reichweite von Kindern** aufbewahren.

Kontakt Hersteller: info@intco.com

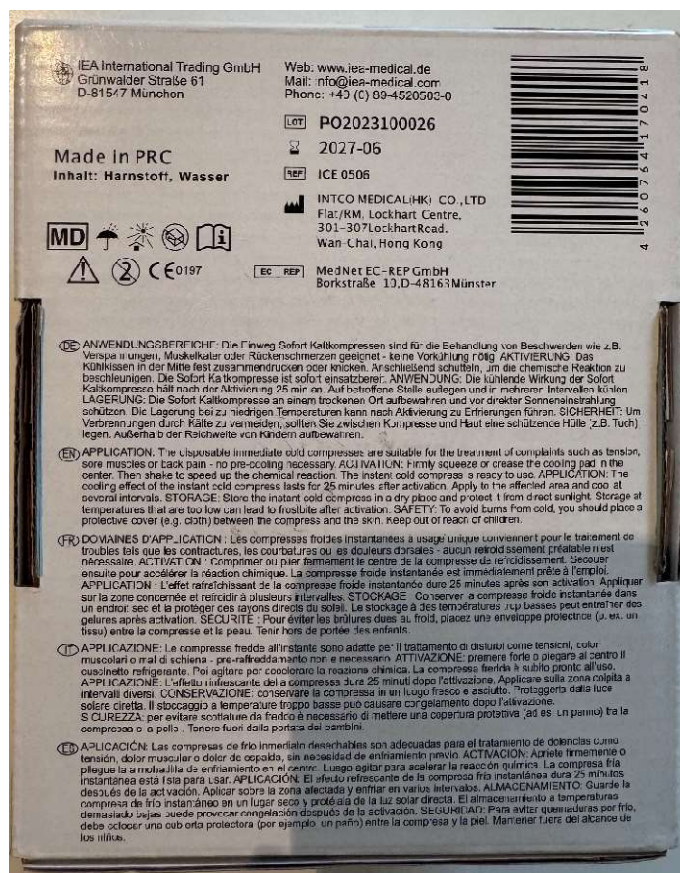



IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61
D-81547 München

Web: www.iea-medical.de
Mail: info@iea-medical.com
Phone: +49 (0) 89-4520503-0


Made in PRC
Inhalt: Harnstoff, Wasser

LOT PO2023100026


EXP 2027-06

REF ICE 0506

INTCO MEDICAL(HK) CO.,LTD
Flat/RM, Lockhart Centre,
301-307 Lockhart Road,
Wan-Chai, Hong Kong

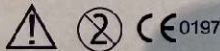

MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10, D-48163 Münster

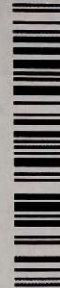

(DE) ANWENDUNGSBEREICHE: Die Einweg Sofort Kaltkompressen sind für die Behandlung von Beschwerden wie Verspannungen, Muskelkater oder Rückenschmerzen geeignet - keine Vorkühlung nötig. **AKTIVIERUNG:** Die Kühlkissen in der Mitte fest zusammendrücken oder knicken. Anschließend schütteln, um die chemische Reaktion zu beschleunigen. Die Sofort Kaltkomresse ist sofort einsatzbereit. **ANWENDUNG:** Die kühlende Wirkung der Sofort Kaltkomresse hält nach der Aktivierung 25 min an. Auf betroffene Stelle auflegen und in mehreren Intervallen. **LAGERUNG:** Die Sofort Kaltkomresse an einem trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerung bei zu niedrigen Temperaturen kann nach Aktivierung zu Erfrierungen führen. **VERBODEN:** Verbrennungen durch Kälte zu vermeiden, sollten Sie zwischen Komresse und Haut eine schützende Abdeckung (z.B. Tuch) legen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

(EN) APPLICATION: The disposable immediate cold compresses are suitable for the treatment of complaints such as sore muscles or back pain - no pre-cooling necessary. **ACTIVATION:** Firmly squeeze or crease the center. Then shake to speed up the chemical reaction. The instant cold compress is ready to use. **APPLICATION:** The cooling effect of the instant cold compress lasts for 25 minutes after activation. Apply to the affected area at several intervals. **STORAGE:** Store the instant cold compress in a dry place and protect it from direct sunlight. Temperatures that are too low can lead to frostbite after activation. **SAFETY:** To avoid burns from cold, use a protective cover (e.g. cloth) between the compress and the skin. Keep out of reach of children.

(FR) DOMAINES D'APPLICATION : Les compresses froides instantanées à usage unique conviennent pour les troubles tels que les contractures, les courbatures ou les douleurs dorsales - aucun refroidissement préalable nécessaire. **ACTIVATION :** Comprimer ou plier fermement le centre de la compresse de refroidissement.

DE Sofort Kaltkompressen
Kühlpads für den Einmalgebrauch

EN Instant cold pack
Disposable cooling pads

FR Compresse froide instantanée
Coussinets de refroidissement jetables

IT Compresse fredda all'istante
Impacco freddo monouso

ES Compresa fría instantánea
Almohadillas de enfriamiento
desechables



✓ **Sofort einsatzbereit**
Immediately ready for use
immédiatement prêt à l'emploi
Immediatamente pronto per l'uso
Imediatamente listo para su uso

✓ **Sofort anwendbar**
Immediately applicable
immédiatement applicable
Immediatamente applicabile
Immediatamente aplicable

✓ **Sofort wohltuend**
Immediately pleasant
immédiatement bienfaisant
Immediatamente calmante
Immediatamente calmante

