

IEA Medical Augenmaske

(Für alle Größen und Varianten)

- Anwendung:
 - Kälteanwendung: Die Augenmaske in einer schützenden Hülle für ca. 30 Minuten in den Gefrierschrank legen, maximal 20 Minuten anwenden.
 - Wärmeanwendung: Für 15 Sekunden bei 600 Watt in der Mikrowelle erwärmen und gut durchkneten, um die Wärme zu verteilen.
- Warnhinweise:
 - Beim Erhitzen die Maske beobachten und die Mikrowelle sofort ausschalten, wenn sich die Maske ausdehnt.
 - Die Perlen der Maske dürfen nicht verschluckt werden.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kontakt-Hersteller:
 - info@intco.com




DE - ANWENDUNG: Die Augenmasken sind für die Kälte- und Wärmebehandlung geeignet. Sie wirken schmerzlindernd bei Beschwerden, wie geschwollene Augen, Augenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne und Fieber. **KÄLTANWENDUNG:** Für eine Kältekompressur die Augenmaske, in einer schützenden Hülle, für ca. 30 Minuten in den Gefrierschrank legen. Für eine optimale Wirkung, verwenden Sie die Augenmaske in kurzen Intervallen für maximal 20 Minuten. **WÄRMENANWENDUNG:** Für eine Wärmekompressur die Maske für etwa 15 Sekunden, bei 600 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Danach gut durchkneten um die Wärme zu verteilen. **WIEDERVERWENDBAR:** Die Augenmasken sind mehrfach verwendbar, lange haltbar und beständig. Das Material ist äußerst hygienisch zur Haut. Es speichert langanhaltend Wärme und Kälte. **SICHERHEIT:** Beachten Sie die Augenmaske beim Erhitzen. Wenn sich die Gesichtsmaske ausdehnt, die Mikrowelle sofort ausschalten. Das Perlen der Maske dürfen nicht geschluckt werden! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

EN - APPLICATION: The eye masks are suitable for cold and heat treatment. They have a pain-relieving effect on complaints such as swollen eyes, eye pain, headaches, migraines and fever. **APPLICATION OF COLD:** For a cold compress, place the eye mask in a protective cover in the freezer for approx. 30 minutes. For optimum effect, use the eye mask at short intervals for a maximum of 20 minutes. **HEAT APPLICATION:** For a heat compress, heat the mask in the microwave for about 15 seconds at 600 watts. Then knead well to distribute the heat. **REUSABLE:** The eye masks can be used several times and are durable and resilient. The material is extremely hygienic for the skin. It retains heat and cold for a long time. **SAFETY:** Watch the eye mask as it heats up. If the face mask expands, switch off the microwave immediately. The beads of the mask must not be swallowed! Keep out of the reach of children.

FR - APPLICATION: Les masques pour les yeux conviennent aux traitements par le froid et la chaleur. Ils ont un effet antidouleur en cas de gonflement des yeux, de douleurs oculaires, de maux de tête, de migraines et de fièvre. **APPLICATION DU FROID:** Pour une compresse froide, placez le masque oculaire dans une housse de protection au congélateur pendant environ 30 minutes. Pour un effet optimal, utilisez le masque oculaire à intervalles rapprochés pendant 20 minutes au maximum. **APPLICATION DE LA CHALEUR:** Pour une compresse de chaleur, chauffez le masque au micro-ondes pendant environ 15 secondes à 600 watts. Malaxez ensuite bien le masque pour répartir la chaleur. **REUTILISABLE:** Les masques oculaires peuvent être utilisés plusieurs fois et sont durables et résistants. Le matériau est extrêmement hygiénique pour la peau. Il conserve la chaleur et le froid pendant longtemps. **SECURITE:** Surveillez le masque oculaire lorsqu'il chauffe. Si le masque facial se dilate, éteignez immédiatement le micro-ondes. Les billes du masque ne doivent pas être avalées. Tenez hors de portée des enfants.

IT - APPLICAZIONE: Le maschere per gli occhi sono adatte per il trattamento a freddo e a caldo. Hanno un effetto antidolorifico su disturbi quali occhi gonfi, dolore agli occhi, mal di testa, emicrania e febbre. **APPLICAZIONE DEL FREDDO:** per un impacco freddo, mettere la mascherina per gli occhi in un coperchio protettivo nel congelatore per circa 30 minuti. Per un effetto ottimale, utilizzare la maschera per gli occhi a brevi intervalli per un massimo di 20 minuti. **APPLICAZIONE AL CALORE:** per un impacco al calore, riscaldare la maschera nel microonde per circa 15 secondi a 600 watt. Poi impastare bene per distribuire il calore. **RIUTILIZZABILE:** le mascherine per gli occhi possono essere utilizzate più volte e sono resistenti e durevoli. Il materiale è estremamente igienico per la pelle. Conserva a lungo il calore e il freddo. **SI CURITÀ:** Osservare la maschera per gli occhi mentre si riscalda. Se la maschera facciale si espande, spegnere immediatamente il microonde. Le perle della maschera non devono essere ingerite! Tenere fuori dalla portata dei bambini. **INFORMAZIONI:** tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Conservare asciutto e fresco. Adatto solo per uso singolo. Smaltimento nei rifiuti residui. Da consumarsi preferibilmente entro: vedere la confezione. Contenuto: polvere di ferro, acqua, sale, carbone attivo.

ES - APLICACIÓN: Las mascarillas oculares son adecuadas para tratamientos con frío y calor. Tienen un efecto analgésico en dolencias como ojos hinchados, dolor ocular, dolores de cabeza, migrañas y fiebre. **APLICACIÓN DEL FREDDO:** Para una compresa fría, coloque la máscara ocular en una funda protectora en el congelador durante aprox. 30 minutos. Para un efecto óptimo, utilice la máscara ocular a intervalos cortos durante un máximo de 20 minutos. **APLICACIÓN DE CALOR:** Para una compresa de calor, caliente la máscara en el microondas durante unos 15 segundos a 600 vatios. A continuación, amase bien para distribuir el calor. **REUTILIZABLES:** Las mascarillas oculares pueden utilizarse varias veces y son duraderas y resistentes. El material es extremadamente higiénico para la piel. Retiene el calor y el frío durante mucho tiempo. **SEGURIDAD:** Vigile la máscara facial mientras se calienta. Si la mascarilla se dilata, apague inmediatamente el microondas. Las perlas de la mascarilla no deben tragarse. Mantener fuera del alcance de los niños.

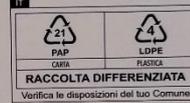

MD
EC REP MedNet EC-REP GmbH
 Borkstraße 10, D-48163 Münster

REF EYE0410

LOT 2024100055

2027-03



IEA International Trading GmbH
 Grünwalder Straße 61
 81547 München
 Web: www.iea-medical.com
 Mail: service@iea-medical.com

INTCO Medical (HK) Co., LTD
 Flat/RM 19C, Lockhart Centre,
 301-307 Lockhart Road
 Wan Chai, Hong Kong

Made in PRC





ndemd bei Beschwerden, wie geschwollene Augen, e, in einer schützenden Hülle, für ca. 30 Minuten in ximal 20 Minuten. **WÄRMENANWENDUNG:** Für eine um die Wärme zu verteilen. **WIEDERVERWENDBAR:** aut. Er speichert langanhaltend Wärme und Kälte. ofort ausschalten. Das Perlen der Maske dürfen nicht

omplaints such as swollen eyes, eye pain, headaches, r for approx. 30 minutes. For optimum effect, use the e microwave for about 15 seconds at 600 watts. Then e material is extremely hygienic for the skin. It retains ave immediately. The beads of the mask must not be

idouleur en cas de gonflement des yeux, de douleurs masque oculaire dans une housse de protection au ndant 20 minutes au maximum. **APPLICATION DE LA tats.** Malaxez ensuite bien le masque pour répartir la atériau est extrêmement hygiénique pour la peau. Il masque facial se dilate, éteignez immédiatement le

olorifico su disturbi quali occhi gonfi, dolore agli occhi, chi in un coperchio protettivo nel congelatore per circa **APPLICAZIONE AL CALORE:** per un impacco al calore, **RIUTILIZZABILE:** le mascherine per gli occhi possono essere ore e il freddo. **SI CURITÀ:** Osservare la maschera per aschera non devono essere ingerite! Tenere fuori dalla ei rifiuti residui. Da consumarsi preferibilmente entro:

ésico en dolencias como ojos hinchados, dolor ocular, a funda protectora en el congelador durante aprox. 30 **APLICACIÓN DE CALOR:** Para una compresa de calor, caliente el calor. **REUTILIZABLES:** Las mascarillas oculares pueden or y el frío durante mucho tiempo. **SEGURIDAD:** Vigile la mascarilla no deben tragarse. Mantener fuera del

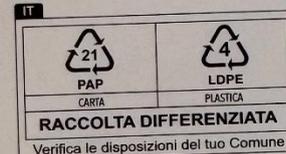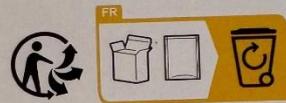

MD
EC REP MedNet EC-REP GmbH
 Borkstraße 10, D-48163 Münster

REF EYE0410

LOT 2024100055

2027-03



IEA International Trading GmbH
 Grünwalder Straße 61
 81547 München

Web: www.iea-medical.com
 Mail: service@iea-medical.com

INTCO Medical (HK) Co., LTD
 Flat/RM 19C, Lockhart Centre,
 301-307 Lockhart Road
 Wan Chai, Hong Kong

Made in PRC



Kältetherapie: Maximal 30 Minuten in den Gefrierschrank legen, in 20 Minuten Intervalle ausenden

Wärmetherapie: In der Mikrowelle bei 600 Watt für etwa 10-15 Sekunden erwärmen. Zwischen durch kontrollieren, um Verbrennungen und Überhitzungen zu vermeiden.

- Verwendung als Kälte Therapie
- Verwendung als Warm Therapie
- Lindert: Kopfschmerzen, Migräne
- Fördert: Durchblutung (Warm) Strafft die Haut (Kalt)

- Lichthemmend - Blockiert Lichtreize
- Weiches Material - passt sich perfekt der Kopfform an
- Universell einstellbare Größe

